

Prime TC

Sedia da trasporto

Un nuovo modo di concepire
il trasporto dei pazienti.


Quando si parla di esperienza dei pazienti, i dettagli contano. Ecco perché ogni aspetto della sedia da trasporto Prime TC è progettato per realizzare un **ambiente accogliente e sicuro, senza dover aggiungere altro, per assistenti, pazienti e loro familiari.** Semplici punti di contatto rendono le operazioni intuitive per tutti gli operatori. L'ergonomia BackSmart è stata integrata nel design per ridurre le operazioni di piegamento e allungamento associate agli infortuni a carico degli assistenti. Un telaio rigido aiuta ad aumentare la durabilità riducendo nel contempo il rischio di furto. Grazie a questo investimento per il benessere dei pazienti e degli assistenti loro capiscono che avete a cuore il loro confort e la loro sicurezza; che, per voi, loro contano.



Progettata per migliorare il confort e la sicurezza dei pazienti, la forma unica dei braccioli dotati di supporto offre al paziente un punto di contatto sollevato e allungato durante le operazioni di seduta e alzata.



Le impugnature di spinta BackSmart aiutano a migliorare la sicurezza degli assistenti, i quali mettono i gomiti in posizione ergonomica a 90°, e si adattano virtualmente a qualsiasi loro altezza.

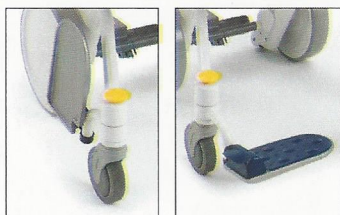

Le pediere pieghevoli aiutano a ridurre i rischi legati agli spostamenti permettendo un percorso senza ostacoli di seduta e sollevamento del paziente. La funzionalità Girevole con azionamento a pedale migliora l'accesso al paziente e un posizionamento più ravvicinato a letti, auto o tavoli.

La **manovrabilità della ruota grande** facilita le operazioni di svolta e cambio direzione.

Il **freno centrale monotocco** riduce le operazioni di piegamento e allungamento migliorando nel contempo l'efficienza degli assistenti.

Le **ruote anti-ribaltamento** offrono una maggiore stabilità e sicurezza ai pazienti.

Il **telaio rigido e impilabile** aiuta a evitare il furto e nel contempo a ingombrare troppo il pavimento.

Progettato per essere facilmente pulibile, il telaio della sedia è composto da componenti compatti facili da disinfettare e lavabili a pressione.

I **punti di attivazione gialli** rendono le operazioni intuitive per tutti gli operatori.

I **componenti spostabili, ma non staccabili** aiutano a ridurre il rischio di furto o perdita delle parti.

La **capacità di sostenere fino a 227 kg** permette di trasportare anche i pazienti più pesanti.

L'**asta per fieboclisi resistente da 1 pollice** è cromata in modo da evitare la formazione di ruggine e dispone di ganci integrati che garantiscono la sicurezza.

Il **supporto verticale per bombole di ossigeno** aiuta a ridurre al minimo le operazioni di piegamento e sollevamento per posizionare la bombola sotto la sedia.

Sedia da trasporto **Prime TC****Ottimizzate il vostro investimento**

Prime TC continua la qualità e l'innovazione proprietarie di Stryker, supportate da una garanzia senza precedenti di 3 anni. Per proteggere ulteriormente il vostro investimento, prendete anche in considerazione l'Accordo ProCare che vi aiuterà a mantenere un parco sedie sempre funzionante con prestazioni ottimali.

L'estetica confortante di Prime TC trasmette l'idea di pulizia, guarigione e un migliore livello di cura. Grazie al confort e al design di una sedia da ufficio, Prime TC si adatta benissimo all'ambiente domestico insieme ad altre apparecchiature della linea Prime.

Stryker Italia S.r.l.
Via degli Olmetti, 1 - 1/a
00060 Formello (RM)
Italia

Tel : +39 06 901041
Fax: +39 06 90400444

www.stryker.it

Class I

EC	REP
Stryker Italia S.r.l.	

Funzioni standard

- Braccioli dotati di supporto
- Pediere pieghevoli
- Impugnature di spinta BackSmart
- Freno centrale monotocco
- Ruote senza punta
- Supporto per cartelle cliniche
- Design compatto in plastica sagomata
- Lavabile a pressione
- Telaio rigido in acciaio verniciato a polvere
- Design impilabile
- Punti di attivazione gialli
- Manovrabilità della grande ruota
- Parti non smontabili

Caratteristiche tecniche

Numero di modello	1450 (Pediere pieghevoli fisse)
	1460 (Pediere pieghevoli girevoli)
Lunghezza totale	40,2" (102,1 cm)
Larghezza totale	28,3" (71,8 cm)
Larghezza della seduta	21,5" (54,6 cm)
Altezza della seduta	
Da pediera	15" (38,1 cm)
Dal pavimento	21" (53,3 cm)
Altezza della sedia	
Con asta per fleboclisi	73" (185,4 cm)
Senza asta per fleboclisi	45" (114,3 cm)
Distanza tra le impugnature di spinta	
Larghezza	16"-20,5" (40,6-52,1 cm)
Altezza dal pavimento	35"-45" (88,9-114,3 cm)
Carico	500 lbs. (227 kg)

Stryker si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso.

Caratteristiche opzionali

- Pediere pieghevoli con funzionalità girevole (modello 1460)
- Supporto verticale per bombole di ossigeno
- Asta per fleboclisi cromata da 1 pollice
- Parte superiore dell'asta per fleboclisi disponibile in sei colori diversi
- Ganci per la sacca di drenaggio

Garanzia

Tre anni per le parti, un anno per utilizzo e spostamenti

Il presente documento è destinato esclusivamente al personale sanitario.

Il personale sanitario deve sempre fare affidamento sul proprio giudizio medico professionale nel momento in cui decide di usare un particolare prodotto nel curare un determinato paziente. Stryker non offre consulenze mediche ed esorta i chirurghi a seguire un periodo di formazione inerente a un particolare prodotto prima di utilizzarlo nelle procedure chirurgiche.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di dimostrare la portata dell'offerta dei prodotti Stryker. Il chirurgo deve sempre consultare il foglio illustrativo nella confezione, l'etichetta del prodotto e/o le istruzioni prima di usare un prodotto Stryker.

È possibile che non tutti i prodotti siano disponibili per tutti i mercati poiché la disponibilità dei prodotti è soggetta alla legislazione e/o alla prassi chirurgica dei singoli mercati. Siete pregati di contattare il vostro rappresentante Stryker se avete domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella vostra zona.

Stryker Corporation o le sue divisioni o altre società affiliate usano o hanno fatto richiesta di usare i seguenti marchi commerciali o marchi di servizio: **BackSmart, Big Wheel, Prime TC, ProCare e Stryker**. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi proprietari o titolari.

I prodotti sopra elencati riportano il marchio CE in ottemperanza alla Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE.



Mkt Lit-MTX80707122012IT Rev A
MTX-RRD/GS 2013/02

Copyright © 2013 Stryker